

ABENA Pants Premium XL3

INCONTINENCE

ABENA Pants XL3



130 – 170 cm

5 gouttes

6 gouttes

7 gouttes

8 gouttes

9 gouttes



XS1

S1

M1

L1

XL1

XXL1

XS2

S2

M2

L2

XL2

M3

L3

XL3

XXL3

UTILISATEURS

UNISEXE

AUTONOME / SEMI-AUTONOME

INCONTINENCE SÉVÈRE

NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.



Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1


La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

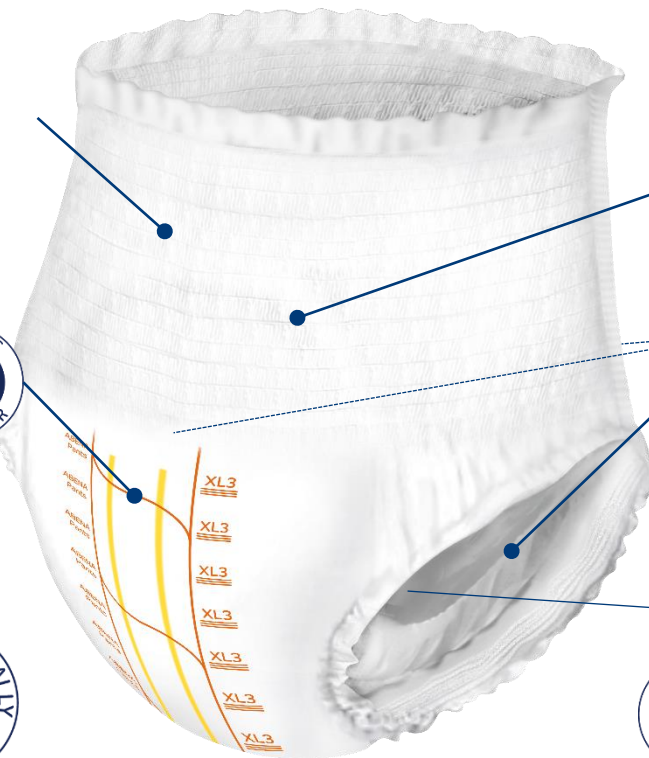

100% respirant
L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Barrières anti-fuites
Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.



Cœur absorbant et maintien au sec
La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA Pants Premium XL3

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	1050 mm – 900 mm
Poids (+/-10%) :	109,1 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2600 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



Le produit ne contient pas
de latex



100% des fibres de cellulose
utilisées proviennent de sources
durables certifiées FSC™.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit
peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est
conforme à toutes les précautions de
sécurité, conformément aux normes et à la
législation du Royaume-Uni.



30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO² de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



ABENA Pants Premium XL3

DONNÉES LOGISTIQUES


Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571001028	1 765	24 x 18 x 23	96	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette (gerbée)	Hauteur palette (cm)
6	5713571001035	11 320	80 x 30,1 x 36,2	12 (24)	124




GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants XL3 est à utiliser de nuit lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 130-170 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.

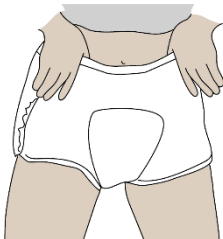

1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

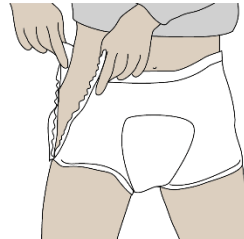

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.



3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS



Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

