

ABENA Pants Premium XXL1

INCONTINENCE

ABENA Pants

XXL1



150 – 203 cm

5 gouttes				Light M	Light L	
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2
8 gouttes				M3	L3	
9 gouttes						XL3

UTILISATEURS

UNISEXE

AUTONOME / SEMI-AUTONOME

INCONTINENCE SÉVÈRE

JOUR/ NUIT

Description

ABENA Pants XXL est la culotte absorbante premium, développée pour les personnes en situation d'obésité souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne et élastique assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile présentant une taille de hanches jusqu'à 203 cm.



Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1


La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Ceinture très élastiquée qui offre un ajustement sécurisé et confortable, adapté à l'utilisateur en situation d'obésité.

Indicateur d'humidité

L'encre s'estompe progressivement au contact du liquide, pour déterminer le niveau de saturation.

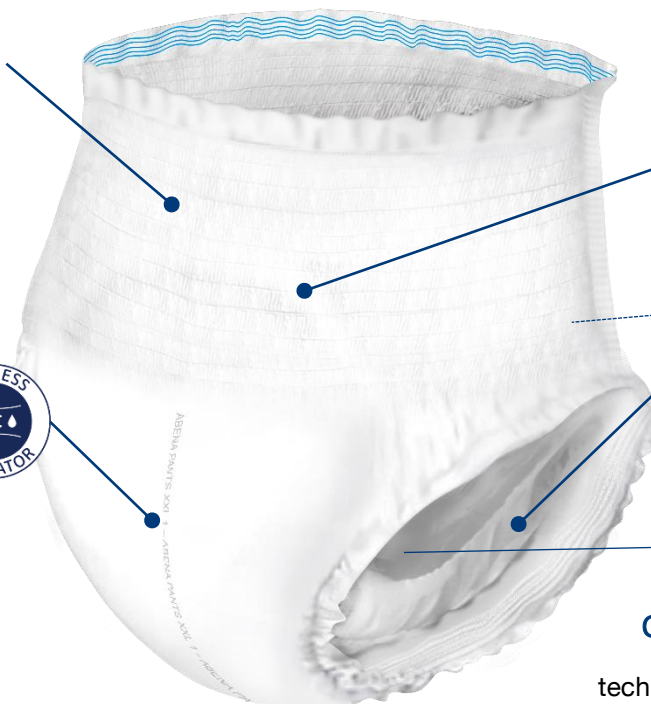

100% respirant
L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Dispositifs anti-fuites
L'association de barrières anti-fuites et de nombreux élastiques sur la ceinture permet une protection optimale.



Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Écolabellisé Nordic Swan

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA Pants Premium XXL1

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	1050 mm – 980 mm
Poids (+/-10%) :	95 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1700 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



Le produit ne contient pas
de latex



30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO² de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



ABENA Pants Premium XXL1

DONNÉES LOGISTIQUES


Pays d'origine: Grèce

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
20	5703538458415	1 925	36,4 x 15,2 x 28,3	80	7 couches de 4 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette	Hauteur palette (cm)
4	5703538457883	8 450	57,5 x 37,4 x 32,5	28	243



GUIDE D'UTILISATION

Spécial bariatrie. Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants XXL1 est à utiliser lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 153-203 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.

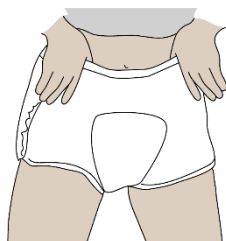

1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.



2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.



3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS



Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence

Une approche structurée de l'hygiène

Toilette & soins de la peau adaptés

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

