

KALLI VISCO



EHPAD



MAD



HÔPITAL

Indications HAS

Support de fauteuil d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à risque **MODÉRÉ à ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), sans asymétrie d'appui et sans risque de « glissé avant ».

Pour les coussins
≤ 45cm de largeur

20 ≤ 100 kg

Pour les coussins
≥ 46cm de largeur

20 ≤ 110 kg

Site Miniac-Morvan (35)



— Coussin KALLI VISCO, standard < 38cm —

81,00 € TTC avec PLV - CODE 1272344

— Coussin KALLI VISCO, standard —

69,00 € TTC avec PLV - CODE 1231233

— Coussin KALLI VISCO, standard > 45cm —

81,00 € TTC avec PLV - CODE 1262713

Classe 2

**3**
ANS
GARANTIENORMES NON FEU
EN 597 part 1 & 2

LES + PRODUIT

- ▶ **Versatile** : convient à tous types de patients
- ▶ **Galbé** : pour une bonne stabilisation du bassin
- ▶ **Nombreuses tailles et largeurs / profondeurs**

Score sur l'échelle de BRADEN



Caractéristiques principales

- Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme (80kg/m³) favorisant l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- Épaisseur de mousse viscoélastique sous les ischions de 6 cm
- Galbe au niveau des cuisses pour favoriser leur bon alignement
- Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée
- Base de la housse inférieure anti-dérapante pour garantir un bon maintien du coussin sur l'assise
- 1 hauteur : 8cm, plusieurs largeurs et profondeurs
- Coussin KALLI VISCO livré avec 2 housses PHARMATEX

Une bonne répartition des pressions en alliant un bon positionnement et un confort en position assise




Mousse viscoélastique
Composition : 80Kg/m³



Conseils d'entretien de la housse

- Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- Nettoyage vapeur saturante sans ajout de formol
- Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse

Galbe anatomique

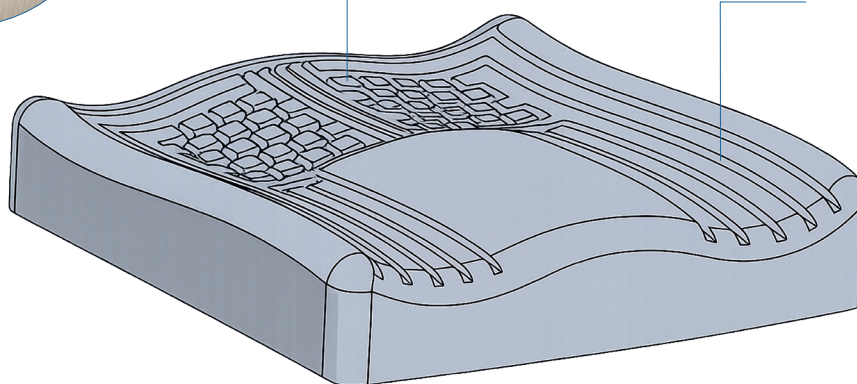

Les conseils de Sonia BAUDRY

Ergothérapeute D.E.

Je recommande le Kalli Visco aux personnes qui ont besoin de repères anatomiques pour s'installer correctement au fauteuil. Ce coussin prévient le risque de formation d'escarres lié à un mauvais positionnement du bassin et des membres inférieurs.



Dimensions	Référence	Housse de rechange
L.34 x P.36 x H.8 cm	17.17209	17.17209H
L.34 x P.38 x H.8 cm	17.17212	17.17212H
L.36 x P.36 x H.8 cm	17.17214	17.17214H
L.36 x P.38 x H.8 cm	17.17216	17.17216H
L.37,5 x P.38 x H.8 cm	17.17234	17.17234H
L.38 x P.42 x H.8 cm	17.17217	17.17217H
L.40 x P.40 x H.8 cm	17.17294	17.17294H
L.40 x P.42 x H.8 cm	17.17218	17.17218H
L.40 x P.45 x H.8 cm	17.17219	17.17219H
L.42 x P.38 x H.8 cm	17.17228	17.17228H

Dimensions	Référence	Housse de rechange
L.42 x P.40 x H.8 cm	17.17226	17.17226H
L.42 x P.42 x H.8 cm	17.17295	17.17295H
L.42 x P.45 x H.8 cm	17.17227	17.17227H
L.43 x P.44 x H.8 cm	17.17267	17.17267H
L.45 x P.40 x H.8 cm	17.17225	17.17225H
L.46 x P.45 x H.8 cm	17.17235	17.17235H
L.48 x P.40 x H.8 cm	17.17229	17.17229H
L.48 x P.43 x H.8 cm	17.17236	17.17236H
L.48 x P.45 x H.8 cm	17.17271	17.17271H
L.50 x P.45 x H.8 cm	17.17299	17.17299H

Photos non contractuelles



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production
Miniac-Morvan (35)

Dispositifs médicaux
de classe 1





DOSSERET KALLI DOS VISCO



EHPAD



MAD



HÔPITAL

Le dossieret de positionnement KALLI DOS permet d'améliorer le confort en position assise et assure une interface entre la toile du dossier du fauteuil et le dos de la personne. Une situation d'inconfort au niveau du dos serait susceptible d'amener l'utilisateur à glisser sur l'assise du fauteuil.



Site Miniac-Morvan (35)



2
ANS
GARANTIE



NORMES NON FEU
EN 597 part 1 & 2

Score sur l'échelle de BRADEN

23 18 14 12 5

Élevé

LES + PRODUIT

- Réduire les pressions ressenties par la personne au contact du châssis et de la toile du dossier au niveau de la colonne vertébrale et des omoplates
- Épouser la morphologie de la personne, même en cas de cyphose
- Réduire les zones de frottements
- Apporter un confort au quotidien
- Faciliter l'installation et la fixation au fauteuil

Dimensions (cm)	Réf.	Housse de rechange
L.43 x P. 5/10 x H. 44	17.19110	17.19110H
L.48 x P. 5/10 x H. 46	17.19210	17.19210H

Caractéristiques principales

- Caractéristiques du dossieret Kalli dos Visco, Mousse viscoélastique : 80 kg/m³
 - Favorise l'immersion du corps dans la matière pour augmenter les points de contact et réduire ainsi les valeurs de pressions maximales
- Housse : Pharmatex : 60% polyuréthane - 40% polyester
 - Imperméable aux liquides
 - Perméable à l'air
- Housse de protection amovible, extensible, et respirante pour une thermorégulation lors d'une assise prolongée



Les conseils de Sonia BAUDRY

Ergothérapeute D.E.

Je recommande le Kalli dos aux personnes ayant un risque de surpression localisée liée à une altération de courbure de la colonne vertébrale, ou une tendance à incliner le tronc latéralement en raison d'un léger déficit postural.



Conseils d'entretien

Conseils d'entretien du coussin

- À la vapeur saturante sans ajout de formol, produit désinfectant ou eau savonneuse
- Bien laisser sécher à l'air libre avant de remettre la housse

Conseils d'entretien de la housse



KIT KALLI DOS + COUSSIN KALLI VISCO



Désignations	Largeur	Profondeur	Hauteur	Référence
Dosseret Kalli dos Visco	L.43 cm	P.5/10	H.44 cm	17.19110
+ coussin Kalli visco	L.37,5 cm	P.38 cm	H.8 cm	17.19111
+ coussin Kalli visco	L.40 cm	P.40 cm	H.8 cm	17.19112
+ coussin Kalli visco	L.42 cm	P.42 cm	H.8 cm	17.19113
+ coussin Kalli visco	L.43 cm	P.44 cm	H.8 cm	17.19115
Dosseret Kalli dos Visco	L.48 cm	P.5/10	H.46 cm	17.19210
+ coussin Kalli visco	L.46 cm	P.45 cm	H.8 cm	17.19211
+ coussin Kalli visco	L.48 cm	P.43 cm	H.8 cm	17.19212
+ coussin Kalli visco	L.50 cm	P.45 cm	H.8 cm	17.19213

